

平成21年6月5日

各位

株式会社エーアイエス  
カスタマーサポート部

Microsoft Updateにおける「Microsoft SQL Server2005 Express Edition  
Service Pack 3」適用時に発生するトラブルについて

拝啓 時下益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ご利用頂いております MightyCheckerPRO (DB サーバー) では Microsoft 社が提供するデータベース管理ソフト「Microsoft SQL Server2005 Express Edition」を使用しておりますが Microsoft Update を通じて「Microsoft SQL Server2005 Express Edition Service Pack 3」を適用すると問題が発生する可能性がありますので、その内容、対策について下記の通りご報告いたします。

敬具

－ 記 －

**【問題事象】**

適用中にエラー発生や、Windows が再起動を繰り返す問題が発生する可能性があります。この現象が発生した場合、Windows の再セットアップ等の作業を行わない限り、復旧が困難となります。

**【原因】**

現在提供元の Microsoft 社より正式な情報が提供されていない為、明確な原因と対処方法を特定する事ができておりません。

**【当面の対策】**

DB サーバー端末では「SQL Server 2005 SP3」について、当面適用を控えて頂く様お願いします。  
MightyCheckerPRO については、SQL Server 2005 SP3 を適用しなくても支障なくご利用頂けます。  
(\*既に正常に適用が行われている場合でも支障はございません)

次頁以降で Microsoft Update における適用回避方法について解説しています。

自動更新の設定になっているお客様を含め設定状況をご確認下さいますよう重ねてお願い致します。

なお、本件につきまして何かご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。

問い合わせ先：(株) エーアイエス サポート係

TEL：03-5800-5985 FAX：03-5800-5910 E-mail：[support@tais.co.jp](mailto:support@tais.co.jp)

※TEL サポート受付時間：月～金：9:00～17:30 (法定休日及び年末年始を除く)

以上

## 1. 「Microsoft Update」について

「Microsoft Update」とは従来の「Windows Update」とは異なり、Windows OSに関するセキュリティプログラムだけでなく、Microsoft社製アプリケーションに対する修正プログラムも自動的に適用することができるようになっていました。

今回の「Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3」についてはこのMicrosoft Updateにて提供される修正プログラムとなります。

「Microsoft Update」については任意で有効にする設定を行わない限り、従来の「Windows Update」でご利用いただいていることとなります。

下記画面例を参考に DBサーバーを導入している端末で「Microsoft Update」の使用が有効になっているかを確認ください。

「Microsoft Update」が**有効**だった場合：

2. 以降を参照し、SQL Server 2005 SP3が適用されないよう対処が必要です

「Microsoft Update」が**無効**だった場合：

現時点で自動的にSQL Server 2005 SP3が適用されることはありません。

今後「Microsoft Update」の使用開始する場合にはご注意ください。


確認方法：※WindowsXPの場合

スタート⇒すべてのプログラム⇒Windows Updateを起動し、最初に表示されるホームページのタイトルを確認します。



## 2. 「Microsoft SQL Server2005 Express Edition Service Pack 3」の適用抑止方法について

1. ようこそ画面で「カスタム」ボタンを押します。

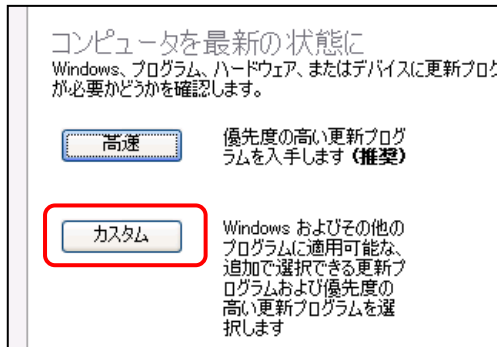

2. 下記①～③の手順で、適用されないよう設定を行います。

※①の SQLServer が表示されない場合や選択しても、修正プログラムが表示されない場合があります。この場合には既に適用済か適用の対象でないと判断されているということになりますので適用抑止の設定は不要です。

Microsoft Update - Microsoft Internet Explorer

更新プログラムの確認とインストール 合計: 74 更新プログラム, 4192 MB, 1 分

優先度の高い更新プログラム

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services Service Pack 3 (KB955706)

次の製品に該当する更新プログラムを選択 SQL Server

優先度の高い更新プログラムについては、コンピュータを保護するためにも、すべてインストールすることを強くお勧めします。他の製品用の更新プログラムを選択するには、左側のオプションを使用してください。

更新プログラムの確認とインストール 合計: 73 更新プログラム, 148.6 MB, 57 分

優先度の高い更新プログラム

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services Service Pack 3 (KB955706)

ダウンロード サイズ: 270.6 MB, 6 分  
このサービス パックは、Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services のすべてのインストールとコンポーネントを Service Pack 3 (SP3) にアップグレードします。追加のインストール オプションが必要な場合は、このサービス パックを Microsoft ダウンロード センターからダウンロードする必要があります。詳細については、サポート技術情報の資料 955706 を参照してください。 詳細...

この更新プログラムを非表示にする

① 「製品で選択」にて「SQL Server」を選択します。

② チェックを外します。

③ チェックを入れます。

使用条件 | 商標 | プライバシー | 日本での個人情報の取り扱い

インターネット

### 3. 「自動更新」について

スタート⇒コントロールパネル⇒「自動更新」を起動し、設定を確認します。

自動：

⇒自動で更新プログラムをダウンロードし、インストールする設定になっています。

1～2で適用されることがないと判断された場合でも、今後対象となる可能性がありますのでご注意ください。「更新を自動的にダウンロードするが、インストールは手動で実行する」もしくは「更新を通知するのみで、自動的なダウンロードまたはインストールを実行しない」の設定にしておくことをお勧めします。

その他の3つ：

⇒更新プログラムが自動でインストールされることはありません。インストールをする場合対象に「Microsoft SQL Server2005 Express Edition Service Pack 3」が含まれていないことを確認した上で、インストールを行ってください。

